


Schrittweise Durchführung



Proberöhrchen beschriften:
[N] Vor- und Nachname
[A] Geburtsdatum
[D] Datum der Probennahme




Stuhlfänger oder einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen.

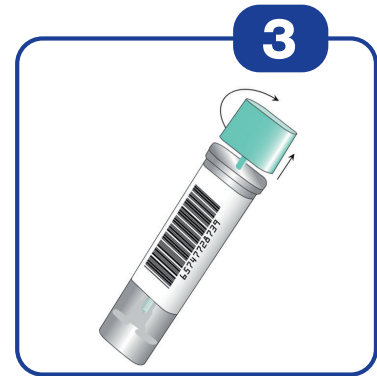


Proberöhrchen durch Drehen öffnen und die türkise Kappe samt Teststab herausziehen.



Mit der Spitze des Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.

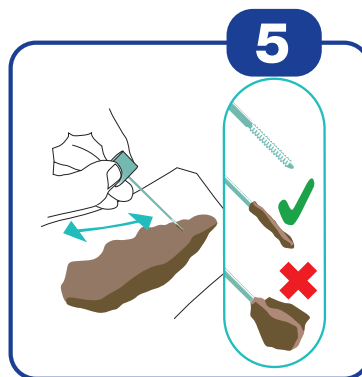


Teststab nicht überfüllen. Nur die Rillen der Spitze müssen danach mit Stuhlprobe gefüllt sein. Eine winzige Probenmenge ist ausreichend.

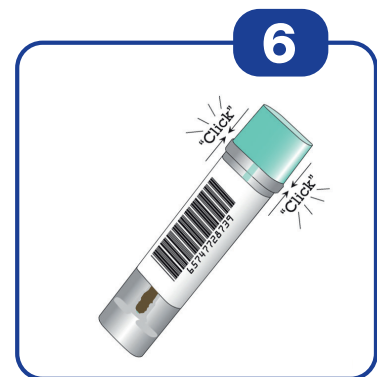

Teststab **nur einmal** in das Proberöhrchen stecken und dieses mit einem hörbaren „Click“ verschließen. **Probennahme nicht wiederholen!**



Proberöhrchen kräftig schütteln, in die grüne Tüte stecken und möglichst am Entnahmetag oder darauffolgenden Tag bei **Ihrem Arzt** (ausgebender Stelle) abgeben.

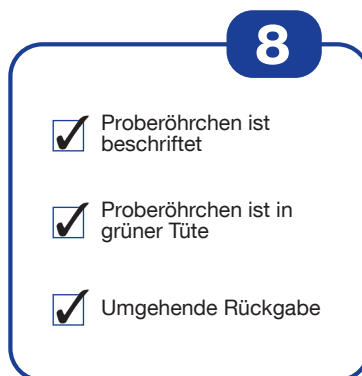

Bitte kontrollieren!

MD V.4.0 / 2022-07-19 (dt)

IVD CE

EC REP

Advena Ltd.

Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan

Vertrieb und Import durch:

Mast Diagnostica GmbH

Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld

Tel. +49 (0)4533 2007 0
Fax +49 (0)4533 2007 68

fit@mast-diagnostica.de
www.fit-screening.de