


### Procedura passo per passo



Etichettare il tubicino di prelievo:  
[N] Nome e cognome  
[A] Data di nascita  
[D] Data del prelievo




Posizionare un raccoglitore per feci  
oppure alcuni strati di carta igienica  
sul WC.

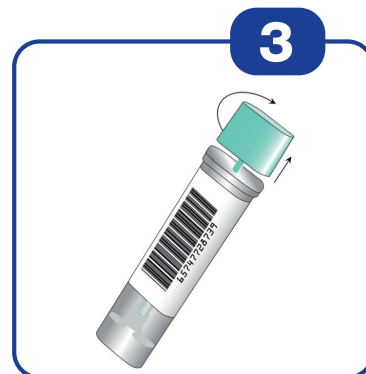


Svitare il tappo del tubicino di prelievo  
ed estrarre il cappuccio tur-  
chese incluso lo stick.




Conficcare la punta dello stick in  
diversi punti del campione di feci.

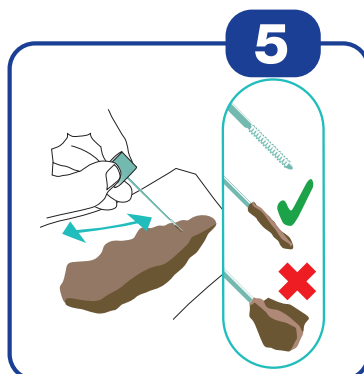


**Non riempire eccessivamente  
lo stick.** Le feci devono essere  
accumulate solo nelle scanalature  
della punta. E' sufficiente una  
quantità minima del campione.

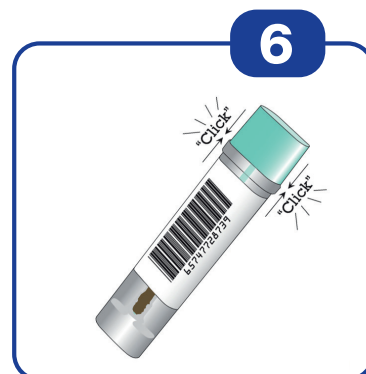

Inserire lo stick di prelievo **solo una  
volta** nel tubicino e chiuderlo con  
un "click" percettibile. **Non ripete-  
re il prelievo!**

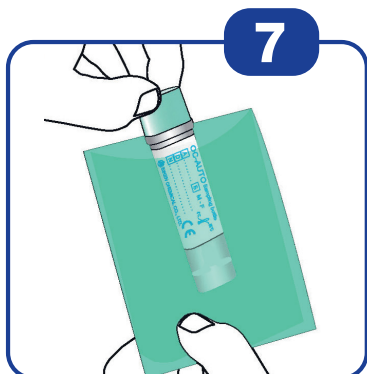

Agitare bene il tubicino, inserirlo  
nella busta verde e consegnarlo  
possibilmente il giorno del prelievo  
o il giorno successivo **al proprio  
medico** (ente emittente).

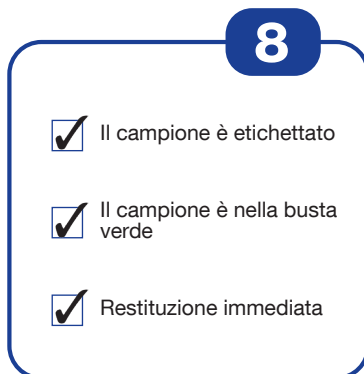

Controllare!

MD V.4.0 / 2022-07-19 (it)

IVD CE

EC REP

**Advena Ltd.**

Tower Business Centre, 2nd Flr.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



**EIKEN CHEMICAL CO., LTD.**

4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan

Distribuzione e importazione da parte di:

**Mast Diagnostica GmbH**

Feldstraße 20  
DE-23858 Reinfeld

Tel. +49 (0)4533 2007 0

Fax +49 (0)4533 2007 68

fit@mast-diagnostica.de

www.fit-screening.de