


### Pobieranie próbki krok po kroku



Opisać próbkę:  
[N] Imię i nazwisko  
[A] Data urodzenia  
[D] Data pobrania próbki



Przed oddaniem stolca umieścić najpierw w muszli sedesowej kilka warstw papieru toaletowego lub przeznaczonego do tego celu specjalnego papieru, aby ułatwić pobranie próbki.

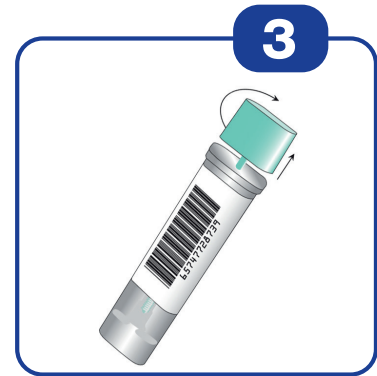


Po oddaniu stolca lekko odkręcić z próbki nakrętkę z pałeczką do pobierania próbki i wyciągnąć ją.



Za pomocą końcówki turkusowej pałeczki do pobierania próbki pobrać próbkę kału z kilku miejsc.




Rowki na końcówce muszą być całkowicie wypełnione kałem.

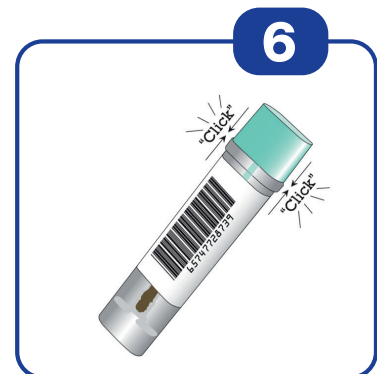

Włożyć pałeczkę do pobierania próbki do próbki i zamknąć próbkę. Słyszalne zatrzaśnięcie typu „klik” oznacza prawidłowe zamknięcie próbki. Nie pobierać próbki ponownie!



Mocno potrząsnąć próbką. Włożyć ją do zielonej torebki, a następnie zamknąć torebkę.

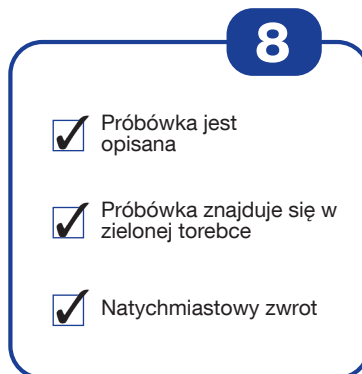

Proszę sprawdzić!

- Próbka jest opisana
- Próbka znajduje się w zielonej torebce
- Natychmiastowy zwrot

MD V.4.0 / 2022-07-19 (pl)

IVD CE

EC REP

**Advena Ltd.**

Tower Business Centre, 2nd Flr.,  
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



**EIKEN CHEMICAL CO., LTD.**

4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan

Dystrybucja i import przez:

**Mast Diagnostica GmbH**

Feldstraße 20  
DE-23858 Reinfeld

Tel. +49 (0)4533 2007 0

Fax +49 (0)4533 2007 68

fit@mast-diagnostica.de

www.fit-screening.de